

Temadag for praksis
personale, Frederik
VI's Hotel d.6. Februar
2018

Kapillærprøvetagning

Kapillærprøvetagning

- Kapillæreprøver kan tages fra
 - fingerspidserne
 - hælen på spædbørn
 - øreflippen
- Ved prøvetagning i finger:
 - Anvend langfinger eller ringfinger.
 - Undgå at stikke i fingre med ringe

Kapillærprøvetagning

Vigtigt at tænke på:

- Hånden skal være varm og afslappet.
- Kolde hænder skal varmes (f.eks. i varmt vand) før prøvetagning for at øge blodcirkulationen.
- *Stik aldrig i en kold finger!*
- *Hvis hånden ikke er tilstrækkelig varm, så tag en veneprøve i stedet!*

Kapillærprøvetagning

En prøve fra fingeren bør tages

- på siden af fingerblommen, der er blodgennemstrømningen størst og smerten mindst.
- på den side der vender mod tommelfingeren, så bliver det lettest at fylde kuvetten.

Kapillærprøvetagning



Skal der foretages afspritning inden prøvetagning?

-Følg lokale forskrifter.

Kapillærprøvetagning


Find en teknik som fungerer for at skabe en ordentlig blodgennemstrømning ved prøvetagningen.

Dette er vigtigt for at opnå et korrekt resultat.

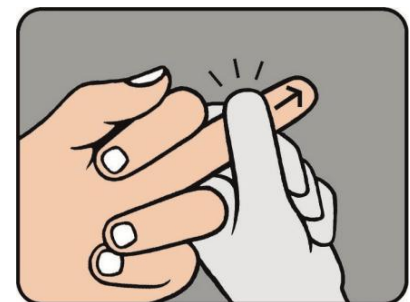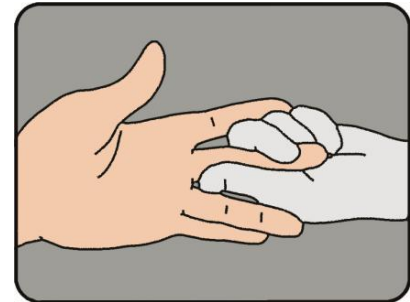

Kapillærprøvetagning

- Aftør de første 2 – 3 dråber blod med en tør serviet. Dette stimulerer blodgennemstrømningen.
- Hvis nødvendigt, læg igen et let tryk mod blommen, indtil en ny bloddråbe fremkommer.
- Tryk, slip, tør...

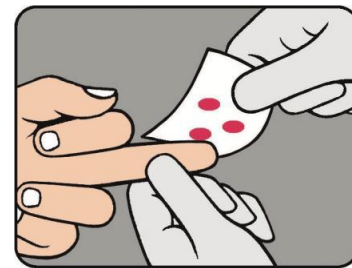

Kapillærprøvetagning

- Sørg for at bloddråben er stor nok til at fylde kuvetten helt på én gang.
- Før kuvettens spids ind i midten af bloddråben.
Kuvetten skal fyldes helt på én gang.
- *Efterfyld aldrig en kuvette!*

Kapillærprøvetagning

- Tør overskydende blod af kuvettens ydersider uden at suge blod ud af kuvetten.
- Læg den fyldte kuvette i kuvetteholderen og skub straks kuvetteholderen ind i måleposition.

